



HU-FRIEDY KEY OPINION LEADER

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ



Шумилович Богдан Романович, д.м.н., профессор, Воронеж.

Профессор, врач высшей категории, докторант кафедры терапевтической стоматологии Воронежской государственной медицинской академии (ВГМА) им. Н.Н.Бурденко Федерального Агенства по здравоохранению и социальному развитию г.Воронеж, Россия

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ



DP18 – Пинцет диагностический



XP23/UNC7 – Зонд UNC15 с маркировкой Quilix через каждый мм в комбинации с эксплорером № 23



MIR5DSHD – Двухстороннее зеркало HD 24 мм



TNPFIAB1 – Уникальная комбинация тонкого шпателя в форме ланцета и гладилки со стандартным углом (III, IV, V классы)



TNCVIPC – Гладилки угловая и дистальная, гибкие и тонкие для работы в интерпроксимальных областях (II, III, IV и V классы)



TNCIGFT1 – Комбинация узкой гладилки и универсального небольшого штопфера



TNBB27/29 – Штопфер для формирования фиссур и жевательных поверхностей

IME12DIN1 – кассета для стерилизации и хранения 10-ти инструментов



Com-Dental

Эксклюзивный дистрибьютор в России –
ГК Com-Dental. Москва, Большой Козихинский
пер.7с2, оф.31 тлф: 8 (495) 580-30-80

Hu-Friedy

XTS ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

“ Основное преимущество серии XTS – полное отсутствие адгезии композита к поверхности инструмента. Благодаря этому значительно облегчается работа (и «пакование», и моделирование) с малыми порциями материала. При использовании серии XTS практически исчезает проблема «воздушных пузырьков» при формировании поверхностного эмалевого слоя мой реставрации. ”

–Д.м.н., Шумилов Б.Р.


Профессор, врач высшей категории, докторант кафедры терапевтической стоматологии Воронежской государственной медицинской академии (ВГМА) им. Н.Н.Бурденко

ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ СЕРИИ XTS

- Рабочая часть инструмента изготовлена из гибкой стали тройной закалки (Immunity Steel®) с алюминий-титан-нитридным (AlTiN) покрытием
- Покрытие AlTiN:
 - создает твердую, гладкую, устойчивую к царапинам поверхность;
 - значительно уменьшает прилипание материала к рабочей части;
 - уникальный черный цвет покрытия не отвечивает, не изменяя таким образом цветовосприятие реставрации;
 - контраст между черным цветом покрытия, композитом и тканью зуба позволяет легко контролировать объем материала.


Независимые исследования подтвердили выдающиеся свойства покрытия алюминий-титан-нитрид (AlTiN) по сравнению с традиционными покрытиями золотых оттенков на основе титана:

Условный показатель скольжения стального шара по поверхности

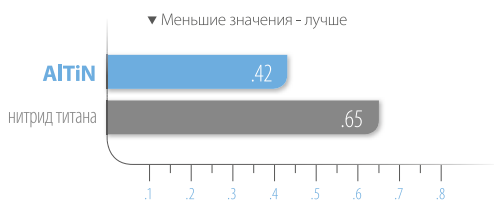

Измерения производились между стальным шаром и образцом с покрытой поверхностью

Твердость (устойчивость к нагрузкам)

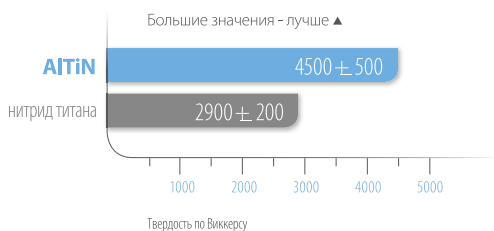

- Большой диаметр (9,5 мм) и легкость ручки обеспечивают работу с инструментом без напряжения кисти
- Широкий конический переходник с насечками от ручки к рабочей части (Comfort Zone) улучшает тактильную чувствительность, облегчает выполнение манипуляций
- Гладкая поверхность ручки легко очищается и устойчива к коррозии
- Матовое антибликовое покрытие ручки (Satin Steel) – дополнительный комфорт при работе с инструментами серии XTS



Com-Dental

Эксклюзивный дистрибьютор в России –
ГК Com-Dental. Москва, Большой Козихинский
пер.7с2, оф.31 тлф: 8 (495) 580-30-80

