

 НОВИНКА

CLEAR COLLECTION:
**ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ
 ДЛЯ РАБОТЫ С
 ЭЛАЙНЕРАМИ**




CLEAR COLLECTION

Новая коллекция Clear от Hu-Friedy состоит из 4-х инновационных ортодонтических инструментов, предназначенных для индивидуализации и оптимизации воздействия элайнеров без предварительного нагревания.

Hu-Friedy Clear Collection была создана С. Джэй Бауманом (S. Jay Bowman), DMD, MSD. Джэй Бауман - дипломант Американского Совета Ортодонтов, член Общества Ортодонтов имени Эдварда Энгла, профессор в четырех университетах. Является автором статей и глав книг, изобретений в области ортодонтии, прочитал множество лекций по всему миру. Более 28 лет руководит и практикует в клинике Kalamazoo/Portage, Мичиган, США.



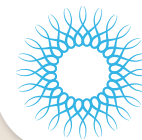

CLEAR COLLECTION: ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛАЙНЕРАМИ

«СЛЕЗА»

678-800


Инструмент для создания вырезов под эластике у десневого края элайнера. Вырез обеспечивает лучшую фиксацию эластиков, что облегчает их использование.



«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ» ИНСТРУМЕНТ

678-801

Коррекция ротации зачастую является проблемой при ортодонтическом лечении с использованием элайнеров. Инструмент позволяет создать вертикальные углубления на поверхности элайнера, расположенные мезиально или дистально на вестибулярной и/или язычной поверхности конкретного зуба. Может быть создана ротационная пара - вертикальные углубления на вестибулярной и лингвальной поверхностях с противоположных сторон зуба. Так же инструмент может быть использован для создания углубления, ускоряющего исправление вестибулярного или лингвального положения зубов.

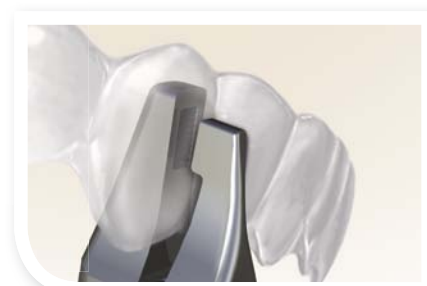

«ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ» ИНСТРУМЕНТ

678-802


Инструмент позволяет сделать горизонтальное углубление на поверхности элайнера, контролирующее торк корня зуба. Вторая возможность применения инструмента - улучшение фиксации элайнера или ретейнера, создавая углубление под аттачментом или в придесневой области.



«ДЫРОКОЛ»

678-803

Инструмент для создания полулунных вырезов на элайнерах под наклеенные кнопки, используемые для эластиков. Кроме того, инструмент может быть использован для коррекции десневого края элайнера.

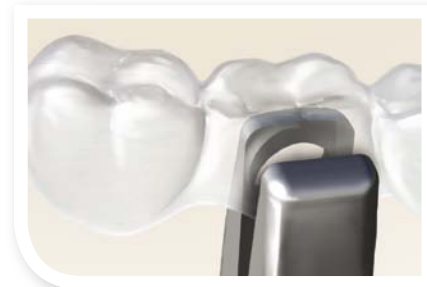

 **Com-Dental**

Эксклюзивный дистрибьютор
компания "Ком-Денталь":
Москва, ул. Малая Пироговская, | д.18, офис 501
тел.: (495) 580-30-80 | тел./факс: (495) 580-30-81
e-mail: comdental@comdental.ru

How the best perform

Hu-Friedy